

Sostanza di verifica intelligente per risultati affidabili



Sostanza di verifica esclusiva

SmartCal presenta un contenuto di umidità molto preciso. La quantità di umidità rilasciata durante l'essiccazione dipende dalla temperatura applicata. Ciò consente di verificare le prestazioni dell'analizzatore di umidità a qualsiasi temperatura compresa tra 70 e 230 °C.




Verifica semplice e rapida

È sufficiente selezionare il metodo SmartCal integrato nello strumento, distribuire uniformemente il contenuto delle bustine di verifica sul piatto portacampioni e avviare la misura. Dopo 10 minuti, potete sapere se le prestazioni del vostro strumento sono soddisfacenti.



Controllo rapido delle prestazioni per tutti gli analizzatori di umidità

SmartCal è una sostanza di verifica innovativa che offre un metodo rapido ed efficiente per verificare le prestazioni del vostro analizzatore di umidità. Verificare regolarmente l'analizzatore di umidità con SmartCal garantisce che le misure di umidità siano sempre affidabili e soddisfino i requisiti delle normative di settore.

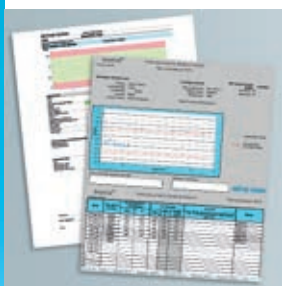

Prestazioni documentate

I report di SmartCal facilitano il monitoraggio e l'interpretazione delle prestazioni dello strumento nel tempo. I risultati possono essere archiviati direttamente nello strumento o inseriti manualmente nel foglio del report Excel® validato.



Versione certificata

Scegliete cSmartCal se vi occorre una sostanza di verifica certificata da un istituto indipendente. Il certificato cSmartCal soddisfa i più severi requisiti normativi.

La verifica con SmartCal richiede solo 10 minuti e viene eseguita come una normale misura.

Il nostro SmartCal StarterPac contiene tutto ciò di cui avete bisogno per iniziare i test di routine con SmartCal. cSmartCal, la versione del prodotto certificata e tracciabile, soddisfa le esigenze dei settori fortemente regolamentati.

SmartCal: per risultati di umidità affidabili.

Panoramica del prodotto

SmartCal StarterPac

Per iniziare a usare SmartCal, consigliamo di acquistare uno StarterPac. Ogni StarterPac contiene 12 bustine di verifica e tutti gli accessori di cui avete bisogno, tra cui la guida utente per SmartCal, i protocolli di misura, i modelli di report, un termoisigrometro e la documentazione di validazione.

| StarterPac | Codice |
|----------------------|----------|
| StarterPac cSmartCal | 30005918 |
| StarterPac cSmartCal | 30005917 |



Bustine SmartCal

La sostanza SmartCal standard è disponibile in confezioni da 12 o 24 bustine e viene fornita con un certificato di produzione emesso da METTLER TOLEDO.

| SmartCal™ | Codice |
|----------------------|----------|
| SmartCal, 24 bustine | 30005790 |
| SmartCal, 12 bustine | 30005792 |



Bustine cSmartCal

La sostanza di verifica certificata cSmartCal è disponibile in confezioni da 12 o 24 bustine. Per ciascun lotto viene rilasciato un Certificato di analisi dall'Istituto indipendente tedesco per la ricerca e l'analisi sui materiali di Berlino (BAM, www.bam.de). I limiti di controllo sono più severi rispetto alla sostanza di verifica SmartCal standard.

| cSmartCal™ | Codice |
|-----------------------|----------|
| cSmartCal, 24 bustine | 30005791 |
| cSmartCal, 12 bustine | 30005793 |



Uso e durata

cSmartCal e SmartCal sono adatte per la verifica di qualsiasi analizzatore di umidità. Le sostanze di verifica cSmartCal e SmartCal hanno una durata di 36 mesi.

Utilizzate SmartCal e approfittate di:

- Una procedura di verifica semplice e rapida
- Risultati affidabili mediante strumenti sottoposti a verifica
- Prestazioni dello strumento documentate nel tempo
- Sostanza di verifica certificata (cSmartCal)
- Nessun problema con gli ispettori



METTLER TOLEDO Group
Laboratory Weighing
Local contact: www.mt.com/localcontacts

Subject to technical changes
© 02/2020 METTLER TOLEDO. All rights reserved
30019617B
Group MarCom RITM615371 MD/JB

www.mt.com/smartcal

Per ulteriori informazioni

