

Substância de Teste Inteligente para Resultados de Umidade Confiáveis



Substância de Teste Exclusiva

O SmartCal tem teor de umidade definido. A quantidade de umidade liberada durante a secagem depende da temperatura aplicada. Isso permite a verificação do desempenho do analisador de umidade a qualquer temperatura entre 70 e 230 C°.




Teste Fácil e Rápido

Basta selecionar o método SmartCal integrado no instrumento, distribuir uniformemente o conteúdo do sachê de teste no prato de amostra e iniciar a medição. Após 10 minutos, você saberá se o desempenho de seu instrumento é satisfatório.



Verificação Rápida de Desempenho – para Todos os Analisadores de Umidade

O SmartCal é uma substância de teste inovadora que oferece um modo rápido e eficiente de verificar o desempenho do analisador de umidade. O teste regular de seu analisador de umidade com SmartCal garante que suas medições de umidade sejam confiáveis e atendam às exigências normativas do setor.

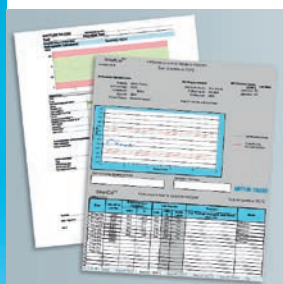

Desempenho Documentado

Os relatórios de medição do SmartCal facilitam o monitoramento e a interpretação do desempenho do instrumento ao longo do tempo. Os resultados podem ser armazenados diretamente no instrumento ou inseridos manualmente em nossa planilha gratuita de relatórios, validada no Excel®.



Versão Certificada

Escolha cSmartCal se precisar de uma substância de teste certificada por um instituto independente. O certificado cSmartCal atende aos mais rígidos requisitos dos regulamentos.

O teste com SmartCal leva apenas 10 minutos e é realizado da mesma forma que uma medição regular.

Nosso SmartCal StarterPac contém tudo o que você precisa para iniciar o teste de rotina SmartCal. O cSmartCal, a versão certificada e rastreável do produto, atende às necessidades de setores altamente regulamentados.

SmartCal – para resultados de umidade em que você pode confiar.

Visão Geral do Produto

SmartCal StarterPac

Para começar a usar o SmartCal, recomendamos adquirir um StarterPac. Cada StarterPac contém 12 sachês de teste e todos os acessórios necessários, incluindo o guia do usuário SmartCal, protocolos de medição, modelos de relatórios, um termo-higrômetro e documentação de validação.

StarterPac	Nº da peça
StarterPac cSmartCal	30005918
SmartCal StarterPac	30005917



Sachês SmartCal

O SmartCal padrão está disponível em pacotes de 12 ou 24 sachês de teste e é fornecido com um Certificado de Produção emitido pela METTLER TOLEDO.

SmartCal™	Nº da peça
SmartCal, 24 sachês	30005790
SmartCal, 12 sachês	30005792



Sachês cSmartCal

O cSmartCal certificado está disponível em pacotes de 12 ou 24 sachês de teste. Para cada lote, um Certificado de Análise é emitido pelo Instituto Federal Alemão para Pesquisa e Teste de Materiais, independente, em Berlim (BAM, www.bam.de). Os limites de controle são mais rigorosos do que os do SmartCal padrão.

cSmartCal™	Nº da peça
cSmartCal, 24 sachês	30005791
cSmartCal, 12 sachês	30005793



Utilização e prazo de validade

O cSmartCal e SmartCal são adequados para testar qualquer analisador de umidade. O cSmartCal e SmartCal têm prazo de validade de 36 meses.

Use o SmartCal e aproveite:

- Um procedimento de teste rápido e fácil
- Resultados confiáveis por meio de instrumentos verificados
- Desempenho documentado do instrumento ao longo do tempo
- Substância de teste certificada (cSmartCal)
- Sem problemas com auditores



Grupo METTLER TOLEDO

Pesagem Laboratorial
Contato local: www.mt.com/localcontacts

Sujeito a alterações técnicas
© 02/2020 METTLER TOLEDO. Todos os direitos reservados
30019620A
Group MarCom RITM615371 MD/JB

www.mt.com/smartial

Para mais informações

