

สารทดสอบ Smart Test

สำหรับผลความชื้นที่เชื่อถือได้



สารทดสอบที่ไม่เหมือนใคร

SmartCal มีปริมาณความชื้นที่ทราบแน่ชัด ปริมาณความชื้นที่ปลดปล่อยออกมาระหว่างการทำให้แห้งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้ ช่วยการทดสอบยืนยันสมรรถนะของเครื่องวิเคราะห์ความชื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 70 ถึง 230 °C




การทดสอบที่สะดวกรวดเร็ว

เลือกวิธีการ SmartCal ที่รวมอยู่ในเครื่องมือ เกือบสิ่งที่คุณบรรจุอยู่ในของสารทดสอบ ให้ลวดลายสอดขนาดใส่ตัวอย่างและเริ่มการวัดค่า เมื่อครบ 10 นาที คุณจะทราบว่าเครื่องมือของคุณมีสมรรถนะเป็นที่น่าพอใจหรือไม่



เก็บบันทึกประสิทธิภาพการทำงาน

รายงานผลการวัดค่าโดย SmartCal ช่วยให้ตรวจสอบและแปลความหมายสมรรถนะของเครื่องมือของคุณได้อย่างง่ายดายตลอดช่วงเวลา ผลการวัดสามารถจัดเก็บไว้ในเครื่องมือได้โดยตรง หรือกรอกลงบนแผ่นรายงาน Excel® แบบแมนนวล

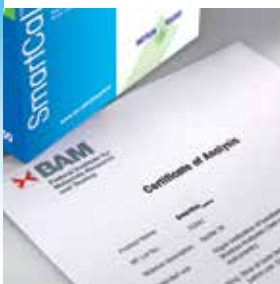

เวอร์ชันที่ผ่านการรับรอง

เลือก cSmartCal หากคุณต้องการสารทดสอบที่ได้รับการรับรองจากสถาบันอิสระ ใบบรับรอง cSmartCal ตอบสนองข้อกำหนดของข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เข้มงวดที่สุด



ตรวจสอบสมรรถนะ

ของเครื่องวิเคราะห์ความชื้นทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

SmartCal คือ สารทดสอบที่ทันสมัยซึ่งเป็นวิธีการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบยืนยันสมรรถนะของเครื่องวิเคราะห์ความชื้นของคุณ การทดสอบเครื่องวัดความชื้นเป็นตามระยะเวลาด้วย SmartCal ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการตรวจวัดของคุณเชื่อถือได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามข้อกำหนดในอุตสาหกรรม

การทดสอบด้วย SmartCal ใช้เวลาเพียง 10 นาทีเท่านั้น และทำได้ง่าย ๆ โดยใช้วิธีเดียวกันกับการวัดค่าตามปกติ

SmartCal StarterPac ของเรามีทุกสิ่งที่คุณต้องการในการทดสอบ SmartCal เป็นประจำ cSmartCal ที่ผ่านการรับรองและสามารถสอบกลับได้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมสูง

SmartCal – เพื่อผลความชื้นที่คุณวางใจได้

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

SmartCal StarterPac

ในการเริ่มต้นใช้งาน SmartCal เราขอแนะนำให้ซื้อ StarterPac StarterPac แต่ละชุดของเราประกอบด้วยซองสารทดสอบ 12 ซอง พร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่คุณต้องการ รวมถึงคู่มือการใช้งาน SmartCal ไปรโตคอลการวัดค่า แม่แบบรายงาน เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น และเอกสารประกอบการตรวจสอบความใช้ได้

| StarterPac | หมายเลขชิ้นส่วน |
|----------------------|-----------------|
| StarterPac cSmartCal | 30005918 |
| StarterPac SmartCal | 30005917 |



ซอง SmartCal

SmartCal มาตรฐานอยู่ในซองทดสอบ 12 หรือ 24 ซอง และมาพร้อมกับใบรับรองการผลิตที่ออกโดย METTLER TOLEDO

| SmartCal™ | หมายเลขชิ้นส่วน |
|-----------------|-----------------|
| SmartCal 24 ซอง | 30005790 |
| SmartCal 12 ซอง | 30005792 |



ซอง cSmartCal

cSmartCal ที่ได้รับการรับรองจะอยู่ในแพ็คเกจจำนวน 12 หรือซองสารทดสอบ 24 ซอง ใบรับรองการวิเคราะห์หีสินค้าแต่ละแบบตั้งออกโดย สถาบันกลางด้านการวิจัยและทดสอบวัสดุแห่งเยอรมนี ในกรุงเบอร์ลิน (BAM, www.bam.de) ชี้ดจำกัดการควบคุมเข้มงวดกว่า SmartCal มาตรฐาน

| cSmartCal™ | หมายเลขชิ้นส่วน |
|------------------|-----------------|
| cSmartCal 24 ซอง | 30005791 |
| cSmartCal 12 ซอง | 30005793 |



การใช้งานและอายุการเก็บรักษา

cSmartCal และ SmartCal เหมาะสำหรับการทดสอบเครื่องวัดความชื้นใด ๆ cSmartCal และ SmartCal มีอายุการเก็บ 36 เดือน

ใช้ SmartCal และรับประโยชน์จาก:

- ขั้นตอนการทดสอบที่ง่ายและรวดเร็ว
- ผลการทดสอบที่เชื่อถือได้จากเครื่องมือที่ผ่านการทวนสอบแล้ว
- เก็บบันทึกสมรรถนะของเครื่องมือไว้ตลอดช่วงเวลา
- สารทดสอบที่ได้รับการรับรอง (cSmartCal)
- ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับผู้ตรวจประเมิน



METTLER TOLEDO Group

การชั่งน้ำหนักในห้องปฏิบัติการ
ผู้ติดต่อในพื้นที่: www.mt.com/localcontacts

อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางเทคนิค
© 02/2020 METTLER TOLEDO สงวนลิขสิทธิ์
30609954A
Group MarCom RITM615371 MD/JP

www.mt.com/smaltcal

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

