

# موازين الذهب والقيراط JE و JP

## أساسيات عملية قياس الوزن في كل يوم



### جميع الوظائف الأساسية التي تحتاجها لوزن المجوهرات بدقة

تفي مجموعة JE الشاملة بجميع متطلباتك اليومية لوزن المجوهرات بفضل الموازين البسيطة والموثوقة، والتي تشمل موديلات تتميز بدقة تصل إلى 5 مواضع عشرية لتمكينك من وزن الذهب والألماس بأقصى مستويات الدقة. استمتع بالشاشة الكبيرة الساطعة وستكون جميع وظائف الميزان الأساسية في متناول يديك.

بفضل أُنقال الوزن الاختبارية الداخلية، يمكنك اختبار الميزان وضبطه في أي وقت بمجرد لمسة زر واحدة لضمان الدقة المستمرة.

يوفر الهيكل الصلب ثباتًا عاليًا لضمان الحصول على نتائج سريعة ومنع الميزان من التحرك إذا تعرض لصدمة عن طريق الخطأ. بفضل موازين JE المصممة من مواد عالية الجودة، ستوفر لك سنوات من الخدمة الموثوقة.

### الأداء الصلب

بفضل وجود قاعدة معدنية وكفة وزن من الصلب المقاوم للصدأ وحماية من الحمل الزائد، تتحمل هذه الموازين القوية الاستخدام اليومي المكثف. يضمن الاستقرار العالي الحصول على نتائج سريعة.



### المهام اليومية الفعالة

مع الوظائف الأساسية التي تحتاجها فقط، تتسم عملية تشغيل الميزان بالسرعة والسهولة. تسهل أُنقال الوزن الاختبارية اختبار الميزان وضبطه في أي وقت بمجرد لمسة زر واحدة.



### ضبط المستوى بسهولة

أصبح ضبط مستوى ميزانك أمرًا سهلًا بفضل الأرجل الكبيرة القابلة للضبط. يوجد مؤشر المستوى في المقدمة، لذلك من السهل التحقق من المستوى والتأكد من أن ميزانك يعمل بدقة.




### خطاف الوزن

يعد الخطاف الموجود على القاعدة حلًا مثاليًا لقياس وزن العناصر الكبيرة أسفل الميزان. باستخدام التطبيق المدمج، يمكن أيضًا استخدام هذه التقنية لقياس كثافة العناصر الكبيرة من المجوهرات.



## موازين الذهب JE و JP - نظرة عامة على الطراز

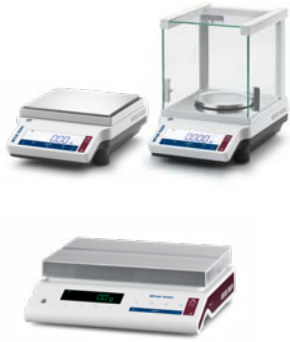

الواجهات	الأبعاد الطول × العرض × الارتفاع	كفة الوزن	التكرارية	السعة	الطراز*	الاستقرائية
RS232	279 × 344 × 210 مم	∅ 80 مم	0.1/0.04 ملج	152/42 جم	JE155DUG	ملج 0.1/0.01
RS232	289 × 319 × 210 مم	∅ 120 مم	0.001 جم	220 جم	JE203G	جم 0.001
RS232	289 × 319 × 210 مم	∅ 120 مم	0.001 جم	320 جم	JE303G	
RS232	289 × 319 × 210 مم	∅ 120 مم	0.001 جم	520 جم	JE503G	
RS232	100 × 319 × 200 مم	180 × 180 مم	0.01 جم	1,200 جم	JE1002G	جم 0.01
RS232	100 × 319 × 200 مم	180 × 180 مم	0.01 جم	2,200 جم	JE2002G	
RS232	100 × 319 × 200 مم	180 × 180 مم	0.01 جم	3,200 جم	JE3002G	
RS232	100 × 319 × 200 مم	180 × 180 مم	0.01 جم	4,200 جم	JE4002G	
RS232	100 × 319 × 200 مم	180 × 180 مم	0.01 جم	5,200 جم	JE5002G	
RS232, USB	118 × 346 × 363 مم	245 × 351 مم	0.1 جم	16,200 جم	JP16001G	جم 0.1
RS232, USB	118 × 346 × 363 مم	245 × 351 مم	0.1 جم	32,200 جم	JP32001G	

## موازين القيراط JE - نظرة عامة على الطراز



الواجهات	الأبعاد الطول × العرض × الارتفاع	كفة الوزن	التكرارية	السعة	الطراز*	الاستقرائية
RS232	279 × 344 × 210 مم	∅ 80 مم	0.2 مللي قيراط / 1 مللي قيراط	210 قيراط / 760 قيراط	JE155DUG	0.1 مللي قيراط / 1 مللي قيراط
RS232	279 × 344 × 210 مم	∅ 90 مم	0.001 قيراط / 0.1 م جم	101 قيراط / 505 قيراط	JE503C	0.001 قيراط / 0.1 م جم
RS232	279 × 344 × 210 مم	∅ 90 مم	0.001 قيراط / 0.1 م جم	140 قيراط / 700 قيراط	JE703C	0.1 م جم
RS232	279 × 344 × 210 مم	∅ 90 مم	0.001 قيراط / 0.1 م جم	220 قيراط / 1,100 قيراط	JE1103C	

\* جميع الطراز متوفرة كإصدارات تجارية قانونية.

\* تتوفر أيضًا طراز لا تحتوي على أفعال وزن اختبارية داخلية (معايرة خارجية)..

## الميزات



### 16 وحدة وزن

قيراط، جرام، ملج، كجم، رطل، أوقية، أوقية ترويسية، القمحة (جرين)، بني وبت، مومي، ميشجال، تايل هونغ كونغ، تايل سنغافورة، تايل تاوان، تيكال، تولا، باهت (تخضع للوائح كل دولة)

نتائج دقيقة	خلية وزن بتعويض القوة الكهرومغناطيسية (EMFC)
	الضغط الداخلي (JE)
	الضغط الذاتي الأتوماتيكي الكامل (JP) (FACT)
	معتمدة من المنظمة الدولية للمقاييس القانونية/البرنامج الوطني لتقييم النوع (NTEP)
التشغيل الفعال	شاشة LCD ساطعة وواضحة (JE)، شاشة HCD عالية التباين (JP)
	تحليل البيانات الإحصائية
	رمز مرور للحماية
	خيار الشاشة الثانوية
	مؤشر المستوى الأمامي
	خطاف للوزن بالتعليق أسفل الميزان
الجودة	قاعدة معدنية
	طبلية وكفة وزن من الصلب المقاوم للصدأ
	الحماية من الحمل الزائد
	تصميم صغير
إمكانية التوصيل	واجهة الربط RS232
	خيار Bluetooth
	وظيفة توجيه الكمبيوتر المدمجة لسهولة نقل البيانات

## الملحقات



غطاء واق  
حماية إضافية ضد الغبار والأوساخ.



أثقال الوزن الاختبارية CarePac®  
الإختبار الروتيني بإستخدام وزنين عياريين فقط يضمن الدقة المستمرة.



طقم قياس الكثافة  
للتحديد السريع والسهل لدرجة نقاء الذهب.



طابعة RS-P28  
ضمان دقة التوثيق.



شاشة ثانوية  
تمكّن عميلك من رؤية نتيجة الوزن.

[www.mt.com/je-jewelry](http://www.mt.com/je-jewelry)

لمزيد من المعلومات

مجموعة METTLER TOLEDO  
الوزن بالمعمل

عرضة للتغييرات الفنية  
© 11/2022 METTLER TOLEDO  
30553683C  
Group MarCom RITM967243 KK